

Circular Informativa

N.º 217/CD/8.1.7.

Data: 08/10/2014

Assunto: **Congeladores da gama Kryo**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante Planer efetuou alterações no *software* dos seguintes modelos de congeladores da gama **Kryo**:


- Kryo 1060-180,
- Kryo 1060-380,
- Kryo 3xx-1.7,
- Kryo 5xx-16,
- Kryo 750Plus,
- MRV Controller,
- Kryo-250

Estas alterações permitem melhorar a resiliência dos congeladores às avarias da sonda de temperatura na sequência de uma situação de curto-circuito. Desta forma, a sonda poderá detetar temperaturas inferiores às reais, fazendo com que o controlador aumente a temperatura do dispositivo, para, como previsto, compensar os valores.

Assim, e apesar de não haver registo da ocorrência de incidentes relacionados com esta situação em Portugal, dada a dificuldade em localizar todos os dispositivos afetados, o Infarmed recomenda aos utilizadores o contacto com o distribuidor **SpaceMedical** (telefone: 214 668 337) para obtenção do aviso de segurança e da atualização do *software*.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo deverão ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 798 7367; e-mail: dvps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo

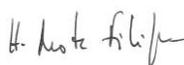

Helder Mata Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo